

Інструкція із застосування: Загоювальні абатменти БНС (BNS)

пис продукту

Цей продукт є верхньою конструкцією зубного імплантату, яка використовується протягом періоду загоєння після встановлення зубного імплантату. Він допомагає природно сформувати м'які тканини ясен перед встановленням коронкової частини. Його видаляють після того, як відбулася остеоінтеграція.

ільове використання

Верхня конструкція зубного імплантату, яка сприяє формуванню м'яких тканин ясен протягом періоду загоєння після встановлення зубного імплантату.

окази до використання

Стоматологічні абатменти для загоєння – це попередньо виготовлені протезні компоненти, які безпосередньо з'єднуються з внутрішньо-кістковими зубними імплантатами або абатментами та призначені як тимчасові компоненти для процедур протезування від одного зуба до протезування повного зубного ряду.

роцедура

ідготовка перед використанням

ірургічні методи встановлення зубних імплантів вимагають проведення спеціалізованих та складних процедур, тому дані маніпуляції повинні виконувати лікарі з відповідною освітою та вмінням проведення імплантації.

е використовуйте продукт, якщо його упаковка пошкоджена.

ішення про оперативне втручання приймається з урахуванням придатності кісткової тканини та використання відповідних хірургічних методів.

ідготуйте відповідні імплантати, враховуючи передбачувані сценарії та запобіжні заходи.

ентгенограми та різні обстеження надають важливу інформацію для вибору методики проведення процедури, про стан сусідніх зубів та стан кісткової тканини.

еред операцією необхідні передопераційне планування, адекватна візуалізація та дослідження різних місць імплантації.

астосування

ісля встановлення імплантату за допомогою шестигранного ключа 1,2 дюйма (30,48 мм (mm)) прикріпіть заглушку до імплантату з зусиллям 10 Нсм (Ncm). Дотримуйтесь рекомендованого крутного моменту, оскільки надмірний крутний момент може призвести до перелому виробу.

ісля загоєння ясен та остеоінтеграції поверніть заглушку проти годинникової стрілки та видаліть її.

ісля видалення заглушки за допомогою шестигранного ключа 1,2 дюйма (30,48 мм (mm)) прикріпіть абатмент для загоєння до імплантату. Дотримуйтесь рекомендованого крутного моменту (10 Нсм (Ncm)), оскільки надмірний крутний момент може призвести до перелому виробу.

ісля з'єднання перевірте правильність розташування, зробивши рентгенівські знімки.

оли м'які тканини загоїться, видаліть абатмент для загоєння перед постановкою іншого абатмента.

ісляопераційний період

ей продукт не підлягає повторному використанню.

тилізуйте використану упаковку.

терильність

еревірте тип, розмір та термін придатності, зазначені на етикетці упаковки, а також

стан упаковки абатмента та відкрийте упаковку.
ей продукт необхідно стерилізувати в автоклаві при температурі 132°C протягом 15 хвилин (min) з мінімальним часом сушіння 15 хвилин (min).
ироби у відкритій або пошкодженій упаковці слід утилізувати.

опередження

мплантати повинен встановлювати досвідчений стоматолог, оскільки неправильна техніка може призвести до пошкодження імплантату або навколишньої кісткової тканини.
еправильна оцінка стану пацієнта та неправильне проведення процедури може призвести до невдалої операції з імплантації або втрати кісткової тканини.
ухомість імплантованого імплантату, втрата кісткової тканини та хронічна інфекція можуть призвести до невдалої операції з імплантації.
імплантатами слід поводитися дуже обережно, щоб запобігти їх пошкодженню або деформації.

астереження

е слід використовувати продукти, забруднені внаслідок помилки під час проведення процедури.
ей продукт призначений лише для одноразового використання; не використовуйте повторно.
батмент є медичним виробом, що стерилізується користувачем; перед використанням його слід стерилізувати в автоклаві при температурі 132°C протягом 15 хвилин (min) з мінімальним часом сушіння 15 хвилин (min).
икористовуйте відповідні хірургічні інструменти, що відповідають специфікаціям абатмента, під час його кріплення до імплантату.

ротипокази

Не використовувати у:

- пацієнтів з інфарктом або артеріосклерозом в анамнезі;
- пацієнтів, які не виконують призначення і рекомендації лікаря або мають психічні чи фізичні вади, що можуть спричинити нестабільність, порушення фіксації або інші ускладнення щодо імплантату в післяопераційному періоді;
- у пацієнтів зі станами, що впливають на формування кісткової тканини, мікроциркуляцію або кров;
- у вагітних пацієнтів;
- у пацієнтів з гіпертензією або цукровим діабетом.

обічні ефекти

трата кісткової тканини, втрата стабільності, пошкодження зубних протезів, запалення та пошкодження нервів можуть призвести до невдалого результату імплантації.
ожуть виникнути місцеві ускладнення, такі як набряк, гематома, кровотеча, інфекція, запалення, виразка та розходження країв рани.

мови зберігання

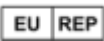
Зберігати при кімнатній температурі (1~30°C).

тилізація

Дотримуйтесь місцевих правил та законів щодо утилізації медичних виробів.

※ Якщо з нашим пристроєм стався будь-який серйозний нещасний випадок, представник нашої компанії з управління якістю повідомить про це уповноважений орган та компетентний орган відповідно до процедури контролю.

Символи, що можуть зазначатися на маркуванні

Символ	Опис	Символ	Опис
	Код партії		Дата виготовлення
	Номер за каталогом		Не використовувати повторно
	Виробник		Зверніться до інструкції із застосування
	Температурні обмеження		Медичний виріб
	Уповноважений представник в Європейському співтоваристві		Унікальний ідентифікатор пристрою
	Увага!		Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена
	Маркування CE		Термін придатності
	Зберігати в сухому місці		Нестерильно

Дата останнього перекладу інструкції із застосування: Грудень 2025.



Інструкція із застосування представлена в електронному вигляді. Щоб отримати безкоштовну інструкцію в паперовому вигляді, телефонуйте за безкоштовним номером 0 800 21-52-32 або замовте доставку через форму на сайті.

Виробник:

ХАБ Біотек Ко. Лтд.

181, Оксан-ро, Вонмі-гу, Пучхон-сі, Кьонгі-до, Республіка Корея



Тел.: +82-2-529-8857. Факс: +82-2-529-8859



UA.TR.136

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Кратія Медтехніка»

04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна

Тел.: 0 800 21-52-32

Електронна пошта: uarep@cratia.ua